

**デジタル補聴援助システム「Roger(ロジャー)」に新製品、2機種を追加！  
生活スタイルに合わせ、より多くの場面で聞き取りをアップ！！**


**「Rogerをもっと身近に！」を実現させる2つの新しいワイヤレスマイクと  
「SN比を改善させて、理解度をアップ」を目的とするレシーバ内蔵の受信機を発売します。**

フォナック・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:遠藤寛明)はこのたび、デジタル補聴援助システムのラインアップを拡充するため「Roger Pen(ロジャー ペン)」、「Roger Clip-On Mic(ロジャー クリップオンマイク)」、ならびに「Roger Focus(ロジャー フォーカス)」を2014年10月14日に発売いたします。

「Roger」は、2013年10月に発売以降、多くの方から高い評価をいただいております。従来からありますダイナミック FM システムと聞き比べていただいても、最初に高音質に驚いていただいているのが実情です。特に雑音下では大きな違いがあることが分かります。また、「Roger」をお試しいただいていない方もいらっしゃるかと思えます。これまでよりシンプルになり身近にお使いいただける新しい「Roger」を是非お手に取りお試しください。

**<新製品>**

**ワイヤレスマイク Roger Pen (ロジャー ペン)**

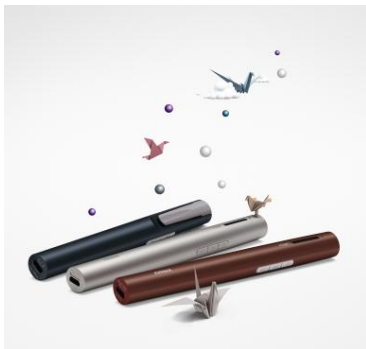

直径 1.5cm、長さ 14.2cm、重さ 28 グラムと非常にスマートで軽量のボディの中に、Roger だけでなく Bluetooth も搭載したワイヤレスマイク。授業や会議といった補聴援助システムでは定番の使い方だけでなく、自宅でのテレビ視聴や音楽鑑賞、携帯電話のハンズフリー通話とマルチな使い方が可能になり、身近な日常の中でもお使いいただけるモデルです。

- マイクロホン内蔵のロジャーワイヤレスマイク
- 接続ボタンで、ロジャー受信機/ワイヤレスマイク(ロジャー ペン/クリップオンマイク)とも簡単にネットワークを構築可能
- マイクモードが3種類(無指向性、インタビュー用の指向性、首かけ用の指向性)
- マイクモードの自動切り替え機能付き(手動でも切り替え可能)
- Bluetooth 内蔵
- 携帯電話をハンズフリーで通話可能
- 付属の充電スタンドを使い、充電しながらテレビなどの音声を送信することが可能
- リチウムポリマーの二次電池使用。2時間でのフル充電で最大7時間使用可能(Bluetooth 使用時には、最大5時間)


## ワイヤレスマイク Roger Clip-On Mic (ロジャー クリップオンマイク)



重さ 18 グラムと非常に小型で軽量のワイヤレスマイク。  
小型ではありながら Roger がもたらすメリットは、十分ご体験いただけるモデルです。

- マイクロホン内蔵のロジャーワイヤレスマイク
- 接続ボタンで、ロジャー受信機/ワイヤレスマイク(ロジャー ペン/クリップオンマイク)とも簡単にネットワークを構築可能
- 付属の充電スタンドを使い、充電しながらテレビなどの音声を送信することが可能
- リチウムポリマーの二次電池使用。2 時間でのフル充電で最大 4.5 時間使用可能

## 受信機 Roger Focus (ロジャー フォーカス)

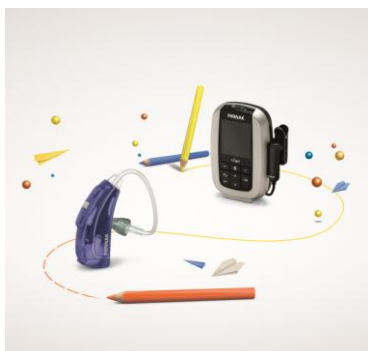

レシーバ内蔵のロジャー受信機。  
騒音が存在することで聞き取りが困難であったり、集中力を保つことが困難な方へのサポートデバイスです。

- レシーバ内蔵のロジャー受信機  
(直接、ロジャー ワイヤレスマイクからの音声を聞き取れます)
- 防水・防塵保護等級 IP57
- 使用電池 PR41(312)
- 17 色のカラーバリエーション

※ロジャー インスパイロは 別売です

■ 発売：2014 年 10 月 14 日(火)

■ 製品ラインナップおよび価格

分類	機種名	価格
ワイヤレスマイク	Roger Pen	109,000 円 (税抜価格)
	Roger Clip-On Mic	66,000 円 (税抜価格)
Roger 受信機	Roger Focus	76,000 円 (税抜価格)

### <特別パッケージ>

パッケージ名	内 訳	価格
Roger パック (片耳用)	Roger ワイヤレスマイク* x 1 台 Roger 受信機* x 1 台	178,000 円(税抜価格)
Roger パック (両耳用)	Roger ワイヤレスマイク* x 1 台 Roger 受信機* x 2 台	258,000 円(税抜価格)

※ ロジャー クリップオンマイクおよびロジャー フォーカスは、Roger パックの適用外です。

■ フォナック社について

ソノヴァグループ傘下にあるフォナック社はスイスチューリッヒ近郊シュテファに本社を構え、60 年以上前より補聴器、ワイヤレス機器を開発しています。聴覚に特化した専門技術と聴覚ケアの専門家との強い協力関係の下、フォナックは製品を通じて世界中の人々の豊かな聞こえをサポートし、QOL の向上に貢献してきました。フォナックの多彩なデジタル補聴器、ワイヤレス機器は世界 100 カ国以上で愛用されています。補聴器の小型化、性能の分野において補聴器業界のベンチマークとして位置づけられ、フォナックは聴覚分野のリーディングカンパニーとして躍進しています。詳細は [www.phonak.com](http://www.phonak.com) または [www.phonak.jp](http://www.phonak.jp) まで。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

フォナック・ジャパン株式会社 マーケティング部

フォナック・フリーコール TEL: 0120-04-4079(月～金 9:00～17:30 土日祝休み) [www.phonak.jp](http://www.phonak.jp)

Phonak – Life is on

「聞こえ」に悩むすべての人の声に耳を傾け、よりよい知識、アイデア、そして聴覚ケアをお届けする。フォナックは、人々がそれぞれの人生において、豊かな音を聞き取り、理解し、経験できるよう、これからも独創的な発想でテクノロジーの限界に挑みつづけます。

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。  
豊かな人生のために、さあ Life is on !

