

2012年2月
フォナック・ジャパン株式会社

プレスリリース

報道関係者様各位

国際保護等級 IP67 取得。水やホコリにより強い補聴器。
『フォナック M H2O シリーズ』
2月22日(水)より新発売

フォナック・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:遠藤寛明)はこのたび、補聴器業界で初めて国際保護等級IP67*を取得した防水・防塵補聴器「フォナック M H2O(フォナック エム エイチ ツー オー)」を2月22日(水)より発売いたします。業界初のたくましさを身に付けた補聴器があなたのアクティブな毎日をサポートします。



※2011年9月取得。2012年1月現在(自社調べ)。完全防水とは異なります。


◆ 特徴

① 国際保護等級 IP67 取得

フォナックは各パーツの隙間を徹底して抑え、水や湿気、ホコリの浸入を防ぐ特殊なハウジングを開発し、2011年9月に補聴器として業界初の国際保護等級IP67を取得しました。


この等級は粉塵試験装置に8時間入れた後や水面から1メートルの水中に30分間入れた後であっても、修理が必要なダメージが発生しないことを示しています。水や汗、砂やホコリにより強い補聴器のため、色々なシーンでより快適な聞こえをサポートします。

また、フォナック M H2O シリーズ用の一体型 FM 受信機 ML15i も IP67 を取得。屋外でのイベントでも FM システムをお使いいただけます。

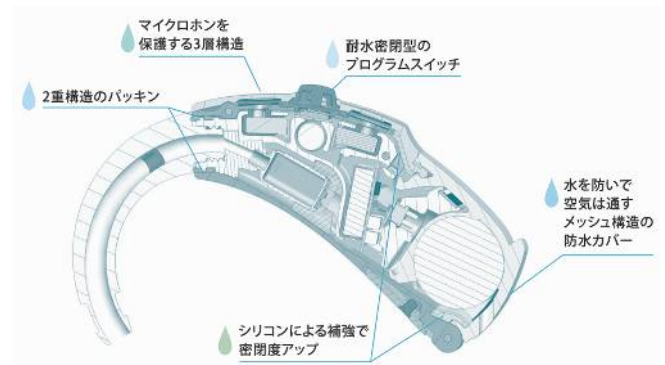

国際保護等級 IP67 について

防塵等級 6 級	人体及び固形物に対する保護等級。6 級は耐塵形に相当。防塵としては最高の等級で、粉塵が内部に侵入しません。
防水等級 7 級	水の浸入に対する保護等級。7 級は水中への浸漬に対する保護に相当。特定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けません。

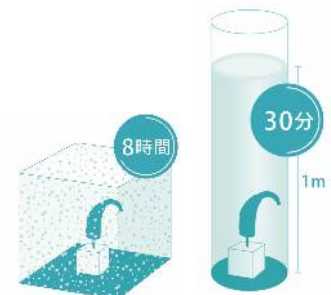

※防水、防塵性能を維持するため、1年ごとのメーカーによるメンテナンスをおすすめします。
(メンテナンス費用:5,000 円。2年の保証期間内は無償)

② “スパイス”チップ

最新チップ“スパイス”はフォナックの最新技術を結集し、パワフルな信号処理技術と設計技術を駆使して開発されました。従来の弊社チップと比べ2倍の処理能力と処理スピードを兼ね備えています。スパイスチップ搭載により、騒がしい場所での会話の聞き取りが大幅に改善し、クリアな音をより自然に、心地よくお届けします。フォナック M H2O シリーズは搭載機能に応じて、ハイエンド、ミドル、ベーシックの3つのクラスをご用意。お客様のニーズやご予算に合わせてお選びいただけるラインナップとなっております。



◆ 発売時期

2012年2月22日(水)より

◆ 製品価格

フォナック アンブラ M H2O	400,000 円(非課税)
便利な両耳装用機能を搭載し、機能も音質も、より高いクオリティを求める方におすすめのハイエンドクラス補聴器。	
フォナック ソラナ M H2O	300,000 円(非課税)
機能と価格のバランスにこだわる方におすすめのミドルクラス補聴器。	
フォナック カッシーア M H2O	200,000 円(非課税)
お手頃な価格で、ベーシックな機能を重視される方におすすめのベーシッククラス補聴器。	

◆ 性能一覧

適合聴力レベル	軽度～中等度
最大出力音圧レベル(1,600Hz) (dB ±5 dB)	121
最大出力音圧レベル(ピーク値) (dB以下)	133
最大音響利得(50 dB入力) (dB ±5 dB)	51
全高調波ひずみ(500Hz/800Hz/1600Hz)	3%以下/3%以下/3%以下
誘導コイル感度(dB ±6 dB)	84
使用電池	PR48(13)
電池寿命(時間)	140～220時間

※本データはJIS C 5512:2000の密閉形疑似耳により、測定、表示してあります。

◆ フォナック社について

ソノヴァグループ傘下にあるフォナック社はスイスチューリッヒ近郊シュテファに本社を構え、60年以上前より補聴器、ワイヤレス機器を開発しています。聴覚に特化した専門技術と聴覚ケアの専門家との強い協力関係の下、フォナックは製品を通じて世界中の人々の豊かな聞こえをサポートし、QOLの向上に貢献してきました。フォナックの多彩なデジタル補聴器、ワイヤレス機器は世界100カ国以上で愛用されています。補聴器の小型化、性能の分野において補聴器業界のベンチマークとして位置づけられ、フォナックは聴覚分野のリーディングカンパニーとして躍進しています。詳細はwww.phonak.com またはwww.phonak.jpまで。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

フォナック・ジャパン株式会社 マーケティング部

フォナック・フリーコール TEL: 0120-04-4079(月～金 9:00～17:30 土日祝休み) www.phonak.jp