

Life is on

「聞こえ」に悩むすべての人の声に耳を傾け、
よりよい知識、アイデア、そして聴覚ケアをお届けする。
フォナックは、人々がそれぞれの人生において、
豊かな音を聞き取り、理解し、経験できるよう、
これからも独創的な発想で
テクノロジーの限界に挑みつづけます。



自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。
豊かな人生のために、さあ Life is on!

聴覚障害程度等級表

身体障害者福祉法 抜粋

級 別	聴 覚 障 害	2級	両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
		3級	両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
		4級	1. 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
		6級	1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの (40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

スイスのデジタル補聴器

フォナック

www.phonak.jp

製造販売業:フォナック・ジャパン株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田 5-2-4
レキシントン・プラザ西五反田
TEL:0120-06-4079
(お客様相談窓口 受付時間:月~金 9:00~17:30 土日祝休み)
FAX:0120-23-4080

許可番号 13B2X10021

フォナック製品のご相談・ご用命は…



●自然故障の場合のみお買い上げから、総合支援法対応の補聴器は1年間、FMシステムは2年間、無償で修理いたします。●補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。

028-1457-17

本カタログの内容は2015年3月現在のものです。

障害者総合支援法カタログ フォナック補聴器・FMシステム

みんなと一緒に
よりよく
聞こえる環境へ



PHONAK
life is on

2015年3月改訂版

総合支援法対応 補聴器



● ナイダ S I ^{エスワン} SP-W / UP

防水
JIS 3級



高度難聴用 ナイダ S I SP-W 重度難聴用 ナイダ S I UP

- サウンドリカバー機能搭載
「さ行」などの聞き取りづらい高音域の音を、聞き取りやすい音域にまで圧縮します。
- 汗と水に強い安心構造
*JIS防水保護等級3級 (JIS C 0920)
鉛直から60°範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。
(散水ノズルによる試験: 10ℓ / 分の水を器具の表面積1㎡あたり、最低5分間散水する試験)
- 指向性マイクロホン搭載 (ウルトラズーム エssenシャル)
- ピーピーという不快なハウリング音を効率的に抑制
- Tコイル内蔵
- FM システム対応
- 4 チャンネル

ナイダ S I 性能一覧

		ナイダ S I SP-W	ナイダ S I UP
最大出力音圧レベル	1,600 Hz (±5 dB)	130	135
	ピーク値 (dB SPL 以下)	139	147
最大音響利得 (±5 dB)		69	75
誘導コイル感度 (±6 dB SPL)		99	105
使用電池		PR48 (13)	PR44 (675)
電池寿命 (時間)		130~200	300~470

本データは JIS C 5512:2000の密閉形疑似耳により測定、表示してあります。

選べるカラー19色



総合支援法対応 FMシステム

FMシステムとは | FMシステム は話し手の声をマイクで拾い、FM電波で聞き手に快適な聞き取りを実現する補聴援助システムです。

FM送信機

話し手に装着してもらい、胸に取り付けられるアイ・ラベルマイクで話し手の声を拾います。見やすいカラーディスプレイと日本語表示で操作は簡単。数多くの最新機能を搭載し、騒音下での聞き取りが向上します。

● インスパイロ プレミアム アイ・ラベル




FM受信機

受信機は補聴器に接続して使用します。パックの受信機はお使いの補聴器に合わせて選ぶことができます。



● ユニバーサルタイプ 受信機 / MLxi

*別途オーディオシューが必要

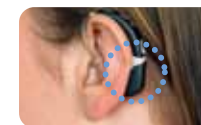

● フォナック補聴器専用受信機
ML9i / ML10i 防水 / ML11i 防水 / ML12i / ML13i / ML15i 防水 / ML16i

選べるカラー



フォナックFM総合支援法対応パック

製品名	パック内容
対応パック(片耳)	178,000円 送信機 インスパイロプレミアム(1台)、受信機(1台)
対応パック(両耳)	258,000円 送信機 インスパイロプレミアム(1台)、受信機(2台)

*対応パックは送信機、受信機を同時に購入する場合のみ適用します。

障害者総合支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(抜粋)

● 購入基準価格表

平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号
改正 平成22年3月31日 厚生労働省告示第124号

補聴器		FM システム	
名称	価格	名称	価格
高度難聴用耳掛け型	43,900円	FM 型受信機交換	80,000円
重度難聴用耳掛け型	67,300円	FM 型用ワイヤレスマイク交換(充電電池含む)	98,000円
		オーディオシュー交換	5,000円
		*フォナック補聴器専用受信機を選択した場合は不要です。	

*障害者総合支援法対応製品の支給を受けるには、まずはお住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。

学校生活には デジタルワイヤレス補聴援助システム「Roger(ロジャー)」 roger

FM電波の代わりにデジタル無線方式を採用することで、騒音下における聞こえや使い心地が飛躍的にアップした次世代の補聴援助システムです。

● Roger 特別パッケージ (送受信機セット)

[片耳用]: 178,000円(税抜)
[両耳用]: 258,000円(税抜)

Roger 特別パッケージ(送受信機セット)は送信機、受信機ともに右記の2種類からお選びいただけます。



*ロジャー インスパイロとFMシステムは互換性があります。詳しくはRogerカタログをご参照ください。