


フォナック クロス Phonak CROS

一側性難聴の方向けのCROS補聴システム

片耳が非常に聞き取りにくく、その方向からの話しかけに対して不便を感じられてる方への改善策。
CROS補聴システムで、よりよい聞き取りを実現しましょう。

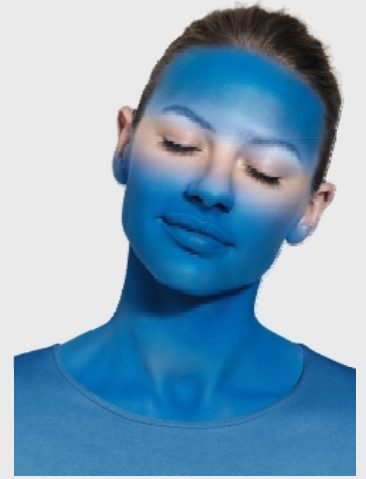

① フォナック クロス 耳かけ型

89,250 円
(税込)

聞こえにくい耳に装着します。
非常に小さい形状で、本体は耳の後ろにすっぽり隠れて目立ちません。
本体も軽く装着感にも優れています。

② フォナック クロス 耳あな型

115,500 円
(税込)

聞こえにくい耳に装着します。
耳の中に挿入するタイプで目立ちません。

☺ CROS補聴システムとは？

一側性難聴の方は、聞き取りができない側の耳（非良聴耳）に入ってきた音に気付くことができない場合があります。そのような時、非良聴耳に入ってきた音を、聞こえる耳（良聴耳）の方に送信して聞くことができます。これを **CROS補聴システム** と言います。



☺ フォナック クロスの使い方は？

CROS補聴システムは、非良聴耳にフォナック クロスを装着し、良聴耳にスパイス補聴器※を装着して使用します。

※ 通信機能付きの器種に限ります

フォナック クロス

非良聴耳に装着します

- フォナック クロス 耳あな型
- フォナック クロス 耳かけ型



スパイス補聴器※

良聴耳に装着します

- フォナック アンブラ
- フォナック ソラナ
- フォナック カッシーア
- オーデオ S SMART
- オーデオ S YES



☺ フォナック クロスの特徴

【コンパクト デザイン】

ワイヤレス通信によりケーブル不要。しかも、Spice補聴器本体がダイレクトにフォナック クロスからの音声を受信するので、小型でシンプル、目立たないデザインになっています。

【デジタル音声での高音質】

高音質でフルオーディオ信号の通信が可能です。

【簡単便利な操作】

使用時の特別な操作は不要。プログラム変更、音量調節の操作も簡単です。

PHONAK
フォナック

life is on

CROSフィッティングとBiCROSフィッティング

CROSフィッティング

良聴耳 : 健聴レベル
非良聴耳 : 殆ど聞こえない

CROS送信機を装着

良聴耳側の補聴器に送信



Spice補聴器を装着

(良聴耳側の音声は増幅せず聞き取る)

BiCROSフィッティング

良聴耳 : 軽度～中等度～高度の聴力低下
非良聴耳 : 殆ど聞こえない

CROS送信機を装着

良聴耳側の補聴器に送信



Spice補聴器を装着

(良聴耳側の音声は補聴器で増幅して聞き取る)

フォナッククロスは、CROSフィッティング、BiCROSフィッティングのいずれの設定も可能です。

フォナッククロス仕様 / 性能表

	フォナッククロス 耳かけ型	フォナッククロス 耳あな型
使用電池	空気電池 PR41 (312)	空気電池 PR41 (312)
電池寿命	25 ~ 35時間	25 ~ 35時間
周波数範囲	130 ~ 6,000Hz	130 ~ 6,000Hz
マイクロホンモード	無指向性 or リアルイヤーサウンド※	無指向性
通信使用電波周波数	10.6MHz	10.6MHz
最大伝達距離	12cm - 20cm	12cm - 20cm

※ 耳介による方向感を再現させ、自然な集音効果が得られる機能です。

カラーバリエーション



印刷時の品質により実際の色合いと違う可能性がありますので、ご了承ください。

オプション

クロスチップ 8,925円 (税込)

耳への保持力にすぐれ、装着した時の着け心地も良くります。



消耗品

クロスホルダー 105円※ (税込)

既成の保持用ホルダーです。



フォナック製品のご相談・ご用命は・・・

スイスのデジタル補聴器

フォナック

www.phonak.jp

製造販売業:フォナック・ジャパン株式会社

〒141-0031

東京都品川区西五反田5-2-4 レキシントプラザ西五反田

TEL 0120-06-4079 (お客様相談窓口) FAX 0120-04-4080