



Life is on

「聞こえ」に悩むすべての人の声に耳を傾け、
よりよい知識、アイデア、
そして聴覚ケアをお届けする。
フォナックは、人々がそれぞれの人生において、
豊かな音を聞き取り、理解し、経験できるよう、
これからも独創的な発想で
テクノロジーの限界に挑みつけます。

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。
豊かな人生のために、さあ Life is on!

スイスのデジタル補聴器 フォナック

www.phonak.jp

製造販売業：フォナック・ジャパン株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-4 レキシントン・プラザ西五反田
TEL:0120-06-4079 (お客様相談窓口) FAX:0120-23-4080

許可番号 [I3B2X10021](#)

フォナック補聴器のご相談・ご用命は…



※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。

このカタログの内容は2010年10月現在のものです。

Audéo SMART Audéo MINI

オーデオ スマート / オーデオ ミニ

補聴器に、「小さい」というデザインを。



小さく、美しく、賢く使う。
オーデオ スマートは、世界のフォナックから。

世界最小クラスの補聴器、オーデオ スマート。
その目につかないほどの補聴器は、
手にする喜びにあふれています。
無駄のない美しく洗練されたボディは、
世界的なデザイン賞「iF design award 2010」を受賞。
さらに、快適で自由な聞き取りをサポートする
フォナック独自の機能を数多く搭載し、
先進のワイヤレス通信をフル活用できるなど、
じつに驚くほどのテクノロジーがその中に。

身につけるほどに、新しい発見がある。
身につけるほどに、あなたの個性になっていく。
人生を楽しむあなたが手にするのは、
オーデオ スマートという気持ちいい「聞こえ」です。





あなたのカラーで選べる11色。



小さなボディが身につけたのは、
あなたの個性を楽しむための、大きな「聞こえ」。

【聞き取りづらい音をもっとクリアに楽しむ「サウンドリカバー」*。

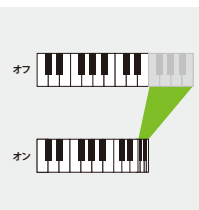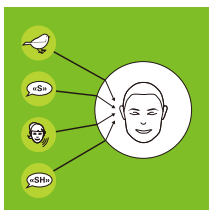

聞き取りづらい高音域の音を、聞こえる音域まで圧縮。よりクリアな会話をはじめ、心地よい鳥のさえずりなど、豊かな音の風景を日常に取り戻します。この機能を支えるフォナック独自開発の“ノンリニア周波数帯域圧縮”は、数々の臨床経験の結果、より広範囲の難聴度や聴力タイプにも応用できることが証明されています。

*オーストラリアメルボルン大学との共同開発により実現。




【周囲の音環境にリアルタイムで適応する「サウンドフロー」。

常に変化する周囲の音環境を瞬時に分析し、さまざまな聞き取り機能をブレンド。その流れるようなプログラム切り替えが、自然でスムーズな聞き取りを可能にします。



【騒音下でもより快適な聞き取りを実現する「ノイズブロックテクノロジー」。

会話の声に焦点を合わせて背景の騒音を抑制。ざわついたお店など通常の補聴器では会話が聞き取りづらくなる環境でもよりクリアな聞き取りが可能です。

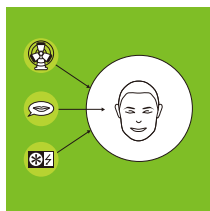

【その他の機能】※搭載機種については巻末機能一覧をご覧ください。

- ピーピーというハウリング音を抑え、心地よい会話を広げる「ホイッスルブロックテクノロジー」。
- 不快な風切り音を抑え、屋外でも快適な活動を楽しめる「ウインドブロックマネージメント」。
- より自然な音の方向感覚が得られる「リアルイヤーサウンド」。
- 不快な衝撃音を瞬時に抑え、会話の自然なニュアンスは残す「サウンドリラックス」。
- 異なる環境での音量の好みを学習し、自動適応する「セルフラーニング」。
- 反響音を抑え、より自然な聞き取りを可能にする「エコーブロック」。




世界を広げる、もうひとつの「聞こえ」を。 両耳装用機能をスマートに楽しむ。

あなたの「聞こえ」をさらに快適に、
豊かにしてくれる両耳装用。
オーディオスマートには、フォナックが可能にした
両耳装用機能をいくつも搭載しています。

聞きたい方向を自由に選択できる 「ズームコントロール」。

聞きたい音の方向を、前後左右で選択し、
切り替えられる機能。車の運転や
サイクリングなど、対象の人に
顔を向けられない場合の会話を
サポートします。

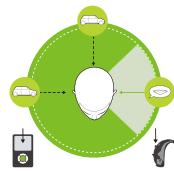

※方向の切り替えは、補聴器本体で直接操作(ダイレクトタッチ機能)、
またはリモコン「マイパイロット」により可能です。

両耳のプログラム調整が ワンタッチで可能な「クイックシンク」。

左右の補聴器間で瞬時にデータの
やりとりを行うことが可能に。
ボリュームやプログラムの変更は
片側の操作だけで済みます。



電話の音声を両耳から 聞き取れる「デュオフォン」。

電話の音声が、自動的に左右両方の
補聴器から聞こえる機能。
通話中、周囲の雑音を抑え、
より快適に電話を楽しめます。



つながる。楽しむ。 ワイヤレス機能をスマートに使いこなす。

会話はもちろん、TVや音楽も、もっと楽しみたいあなたへ。
オーディオスマートなら携帯電話や、
TV、MP3プレーヤー、コンピューターなどと
ワイヤレスにつながり、自由な「聞こえ」の世界を広げます。

フォナックマイコム 26,040円(税込)

テレビや携帯電話、MP3プレーヤーからの
オーディオ信号を品質の高いステレオ音で
補聴器に伝送するワイヤレスインターフェイス。



マイコム テレビパッケージ 36,540円(税込)

Bluetoothアダプター「ボイスステレオ」を
テレビや音楽機器に接続して、付属の
「マイコム」でいつでもワイヤレスでテレビ、
音楽鑑賞を楽しめるパッケージです。



マイパイロット 47,250円(税込)

プログラム変更やボリュームの調節、
装用状態と電池残量の確認が可能な
カラーディスプレイ付リモコン。
便利な時計やアラーム機能なども搭載。



【フォナックマイコム使用時の便利な機能】

- オーディオ信号を高音質のまま自動的に
補聴器に転送する「イージーオーディオ」。
- 音楽や音声を補聴器に自動的に転送する
「イージーBluetooth」。



フォナック史上最小。 人生を美しく楽しむ人へ、オーディオミニ。

その補聴器は、小さい。

その補聴器は、羽のように軽い。

その補聴器は、心地よい「聞こえ」がある。

その補聴器は、着けていることを忘れさせてくれる。

その補聴器は、オーディオミニ。



2010年レッドドットデザイン賞受賞 / 2010年IFデザイン賞受賞

【オーディオミニ搭載機能】

- ・サウンドリカバー
- ・サウンドフロー
- ・ノイズブロックテクノロジー
- ・ホイッスルブロックテクノロジー
- ・ウインドブロックマネージメント
- ・リアルイヤーサウンド
- ・サウンドリラックス
- ・エコブロック
- ・データログ

※搭載器種については巻末機能一覧をご覧ください。

オーディオスマート/ミニ
価格一覧



原寸大

オーディオスマート IX

片耳 380,000円
両耳 640,000円

オーディオスマート V

片耳 270,000円
両耳 450,000円

オーディオスマート III

片耳 190,000円
両耳 320,000円



原寸大

オーディオミニ IX

片耳 360,000円
両耳 610,000円

オーディオミニ V

片耳 250,000円
両耳 420,000円

オーディオミニ III

片耳 170,000円
両耳 290,000円

※補聴器は非課税となっております。

- G5 チリレッド
- G4 オリーブグリーン
- G3 オーシャンブルー
- G2 グレイシャーアイスグレー
- G1 ミッドクラウドグレー
- F9 ミッドナイトブラック
- F8 チョコレートブラウン
- F7 モカブラウングレー
- F6 ピーチベージュ
- F0 ダーククリフグレー
- C0 シルバーシャドウ

※標準色(オーディオスマート/ミニ 共通)は G2:グレイシャーアイスグレーです。

オーディオスマート/ミニ 機能一覧	オーディオスマート						オーディオミニ					
	IX		V		III		IX		V		III	
	標準	パワー	標準	パワー	標準	パワー	標準	パワー	標準	パワー	標準	パワー
適応聴力範囲	軽~中等度	中等~高度	軽~中等度	中等~高度	軽~中等度	中等~高度	軽~中等度	中等~高度	軽~中等度	中等~高度	軽~中等度	中等~高度
チャンネル	20		16		6		20		16		6	
マニュアルプログラム	5(組み合わせ自由)		4(組み合わせ自由)		2+1(ミュート)							
指向性	VoiceZoom (33ch)		VoiceZoom (12ch)		digital AudioZoom		VoiceZoom (33ch)		VoiceZoom (12ch)		digital AudioZoom	
雑音抑制	ノイズブロック(20ch)		ノイズブロック(16ch)		ノイズブロック(6ch)		ノイズブロック(20ch)		ノイズブロック(16ch)		ノイズブロック(6ch)	
ハウリング抑制	ホイスルブロックテクノロジー											
サウンドフロー	プレミアム		アドバンス		スタンダード		プレミアム		アドバンス		スタンダード	
サウンドリカバリー	■		■		■		■		■		■	
サウンドリラクセス	■		■		■		■		■		■	
ウインドブロックマネージメント	■		■		■		■		■		■	
エコブロック	■		■		■		■		■		■	
データログ	■		■		■		■		■		■	
セルフラーニング	■		■		■		■		■		■	
リアルイヤーサウンド	■		■		■		■		■		■	
クイックシンク*	■		■		■		■		■		■	
ズームコントロール*	■		■		■		■		■		■	
デュオフォン*	■		■		■		■		■		■	
ダイレクトタッチ*	■		■		■		■		■		■	
ボリュームコントロール*	■		■		■		■		■		■	
イージーオーディオ	■		■		■		■		■		■	
イージーBluetooth	■		■		■		■		■		■	
フィッティングソフトウェア	iPF2.5以上						iPF2.5以上					
【CRTユニット/既製耳せん/オーダーシェル】												
xレシーバ(標準)	12,600円[税込]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
xレシーバ(パワー)	12,600円[税込]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ドーム型耳せん	210円[税込]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
クローズドドーム	210円[税込]	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
パワードーム	210円[税込]	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	■
スリムチップ	8,925円[税込]	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
cシェル	25,000円[非課税]	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
xシェル	25,000円[非課税]	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
【デジタルワイヤレスアクセサリ】												
マイパイロット	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
フォナックマイコム	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
ボイスステレオ(+フォナックマイコム)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
【FMシステム】												
MLxi(+フォナックマイコム)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■:標準/□:オプション *両耳装着時の機能です。

オーディオスマート/ミニ 性能一覧	オーディオスマート						オーディオミニ						
	IX		V		III		IX		V		III		
	標準	パワー	標準	パワー	標準	パワー	標準	パワー	標準	パワー	標準	パワー	
最大出力音圧レベル	1600Hz <dB±5dB>	112	128	112	128	112	128	113	128	113	128	113	128
	ピーク値 <dB以下>	124	136	124	136	124	136	125	136	125	136	125	136
最大音響利得(50dB入力) <dB±5dB>	45	57	45	57	45	57	45	57	45	57	45	57	
全高調波ひずみ	500Hz <%以下>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	800Hz <%以下>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	1600Hz <%以下>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
使用電池	PR41(312)	PR41(312)	PR41(312)	PR41(312)	PR41(312)	PR41(312)	PR536(10A)	PR536(10A)	PR536(10A)	PR536(10A)	PR536(10A)	PR536(10A)	
電池寿命 <時間>	100~145	100~145	100~145	100~145	100~145	100~145	65~90	60~80	65~90	60~80	65~90	60~80	

※本データはJIS C 5512:2000の密閉形疑似耳により測定、表示してあります。 ※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況や気温、湿度等の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。 ※本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。 ※「コントロール」「ワイヤレス接続」機能をご使用の場合、電池寿命が短くなります。