

オーディオYes

All the sounds of life
聞こえの「答え」がここにある。

性能表 xレシーバ(標準)		オーディオYes IX	オーディオYes V	オーディオYes III
最大出力	1600Hz	112 dB SPL	112 dB SPL	112 dB SPL
音圧レベル	ピーク	124 dB SPL以下	124 dB SPL以下	124 dB SPL以下
最大音響利得		45 ± 5 dB	45 ± 5 dB	45 ± 5 dB
使用電池		PR41 (312)	PR41 (312)	PR41 (312)
電池寿命		110~150時間	110~150時間	110~150時間

性能表 xレシーバ(パワー)		オーディオYes IX P	オーディオYes V P	オーディオYes III P
最大出力	1600Hz	128 dB SPL	128 dB SPL	128 dB SPL
音圧レベル	ピーク	136 dB SPL以下	136 dB SPL以下	136 dB SPL以下
最大音響利得		60 ± 5 dB	60 ± 5 dB	60 ± 5 dB
使用電池		PR41 (312)	PR41 (312)	PR41 (312)
電池寿命		110~150時間	110~150時間	110~150時間

本データはJIS C 5512:2000の密閉形擬似耳により測定、表示してあります。
 ※本カタログに掲載された電池寿命：JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況や気温、湿度等の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。
 ※本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
 ※補聴器は非課税となっております。
 ※アイコムやマイバレットを使用することで電池寿命が短くなることがあります。

スイスのデジタル補聴器

フォナック

www.phonak.jp

製造販売業：フォナック・ジャパン株式会社

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-2-2 神田パークプラザ9F

TEL:0120-04-4079(カスタマーサービス) FAX:03-5294-4080

認証番号 221AABZX00025000

●保証期間について

補聴器本体の保証期間は2年間です。ワイヤレス機器の保証期間は1年間です。
 詳しくは販売店までおたずねください。

フォナック補聴器のご相談・ご用命は…



6.6日は
補聴器の日

※スイス製品Phonak補聴器の日本語のブランド名が「フォナック」と「ホナック」の2種類の表記がありますが同一製品です。(業事法による届け出で、2種類のブランド名を使用したため、そのまま表記しています。)
 ※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。
 しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

このカタログの内容は2009年4月現在のものです。



AUDEO **YES**™

スマート&スタイリッシュな超小型補聴器

028-0395-171/V1.00/2009-04/rz Printed in Japan © Phonak AG All rights reserved

PHONAK
フォナック

life is on

Audéo YES 誕生。

Question 1

これまで聞き取りづらかった
高い音も、はっきりと聞き取れる
補聴器はありますか？

答えは **YES** です。

小鳥のさえずりや、電話の呼び出し音、玄関のチャイムや、会話における子音など、これまで補聴器ではなかなか聞き取りづらかった高音域をカバーし、日常生活におけるスムーズなコミュニケーションを実現します。

Question 2

補聴器を初めてつけた時などに感じる
「こもり感」が少なく、つけ心地も
快適な補聴器はありますか？

答えは **YES** です。

オーディオYesは、低音を聞いたときに耳に残るあの嫌な「こもり感」を大幅に解消。しかも、軽量で目立たないコンパクトサイズだから、一日中つけていてもまったく疲れず、快適な聞こえのままにお過ごしいただけます。

Question 3

室内にいるときも、屋外にいるときも、
いつでも自然な聞こえを楽しめる
補聴器はありますか？

答えは **YES** です。


新世代デジタルチップCOREが実現する高性能なオートマッチング機能により、音の成分、音の方向性、周囲からの雑音など刻々と変化する音環境を即座に分析。さまざまな環境において自然な「聞こえ」をお楽しみいただけます。



聞こえの「答え」がここにある。

Point 1 高音域の聞き取りを改善 「サウンドリカバー」

これまでの一般的な補聴器を使うだけでは聞き取りづらかった高音域の音を、その人の聞き取りやすい音域にまで圧縮する「サウンドリカバー」を搭載。これまでナイーダなど重度難聴者向けの製品に活用されていたフォナック独自の技術が、研究を重ねることで、より幅広い難聴タイプにお使いいただけるようになりました。

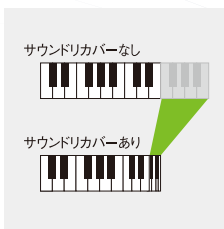

Point 2 快適な装用感と「こもり感」の抑制を実現 「オープンフィッティング」


高音域を補聴器でカバーし、低音域はそのまの音で聞き取る「オープンフィッティング」に対応。これまで悩まされた音のこもり感を軽減するだけでなく、「サウンドリカバー」との相乗効果でこれまではない聞こえの世界が実現するでしょう。



AUDIO YES™

Point 3 音環境の変化にリアルタイムで適応 「サウンドフロー」

状況によって刻々と変化する周囲の音環境にスムーズに適応し、その時々でもっとも明瞭な聞き取りができる状態へと調整する「サウンドフロー」機能を搭載。日常のあらゆるシーンにおいて、わざわざ補聴器を調節する必要なく、いつでも自然な聞こえでお過ごしいただけます。

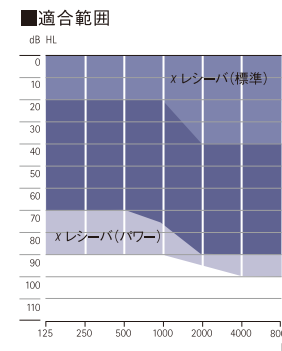

イエス ナイン

オーディオYes IX

xレシーバ(標準) 片耳 370,000円
xレシーバ(パワー) 片耳 380,000円

軽中 SF プレミアム Sリカバー ホイッスルブロック ノイズブロック ウインドブロック リアルイヤー Sリラックス
中高 エコー スムースコントロール データログ セルフラーニング 20 VZ 33 アイコム M デュ

イエス ファイブ

オーディオYes V

xレシーバ(標準) 片耳 260,000円
xレシーバ(パワー) 片耳 270,000円

軽中 SF アドバンス Sリカバー ホイッスルブロック ノイズブロック ウインドブロック リアルイヤー
中高 データログ セルフラーニング 16 VZ アイコム M デュ

イエス スリー

オーディオYes III

xレシーバ(標準) 片耳 180,000円
xレシーバ(パワー) 片耳 190,000円

軽中 SF スタンダード Sリカバー ホイッスルブロック ノイズブロック データログ 6 dAZ
中高 アイコム M デュ

アイコンの詳細については、「フォナック補聴器総合カタログ」をご参照下さい。

17 color variations



Option オプション オプションとの連動でさらに広がる「聞こえ」の世界

■アイコムで広がる聞こえの世界

iCom (アイコム)

さまざまな機器からの音声信号を高音質のまま補聴器に伝送するワイヤレスインターフェースです。FM受信機(別売)も接続できます。

アイコム 47,250円(税込)

ワイヤレス接続できる主な機器

携帯電話 / MP3プレーヤー / テレビ / パソコン / FMシステム など

・接続方法によっては、別途機器が必要になる場合があります。

オーディオYes + アイコム+FM受信機 + FM送信機

FMシステムを利用した会議や授業

遠くにいる人の声を電波を使って飛ばすFMシステムとの接続で、騒がしい場所での授業や、大人数による会議でも一人ひとりの声をはっきりと聞き取れます。

※FMシステムの詳細については別冊「FMコレクション」をご参照下さい。



オーディオYes + アイコム

※本組合わせとは別にフルーツースアダプターが必要になる場合があります。

テレビや音楽をワイヤレスに楽しむ

ワイヤレス通信で、離れた場所からでも快適にテレビや音楽が楽しめます。また、MP3プレーヤーとの接続で、外出時でも音楽が楽しめます。



携帯電話でのハンズフリー通話も可能

携帯電話に電話がかかってくると自動的に通話可能な状態となり、クリアな音質をハンズフリーの状態でも楽しめます。



■リモコンで広がる快適な世界

補聴器のコントロールや、装着状態を確認できるカラーディスプレイのリモコン。

マイパイロット 47,250円(税込)

補聴器の電池残量や選択したプログラムがカラーディスプレイにて確認できます。

アイビュー 31,500円(税込)

Accessory アクセサリー

■アクセサリの種類

アクセサリ名	サイズ
ドーム型耳せん	5S, 7S, 10S 5L, 7L, 10L
クロスドーム	S, L
パワードーム	9, 10, 11
xレシーバ(標準)	右: 0.1, 2, 3 左: 0.1, 2, 3
価格 12,600円(税込)	
スリムチップ※1	右: 0.1, 2, 3 左: 0.1, 2, 3
価格 8,925円(税込)	
Cシェル※2	右: 0.1, 2, 3 左: 0.1, 2, 3
価格 25,000円(非課税品)	
Xシェル※2	右: 0.1, 2, 3 左: 0.1, 2, 3
価格 25,000円(非課税品)	

※1 xレシーバ(標準)のみ選択可能 ※2 xレシーバ(パワー)のみ選択可能