

| オーディオ S SMART I 機能一覧 | M | P | SP |
|-------------------------|---|-------------|-------|
| チャンネル | | 4 | |
| マニュアルプログラム | | 4 | |
| ウルトラズーム(指向性) | | ■ベーシック(1ch) | |
| ノイズブロック(雑音抑制) | | ■ベーシック(4ch) | |
| ホイスルブロック(ハウリング抑制) | | ■ | |
| サウンドリカパー | | ■ | |
| データログ | | ■ | |
| プログラムスイッチ | | ■ | |
| 【CRTユニット/既製耳せん/オーダーシェル】 | | | |
| xレシーバ(標準) | ■ | | |
| xレシーバ(パワー) | | ■ | |
| xレシーバ(スーパーパワー) | | | ■ |
| オープン型耳せん | ■ | □ | |
| クローズド型耳せん | □ | □ | |
| パワー型耳せん | □ | ■ | |
| スリムチップ | □ | | |
| 8,500円[非課税] | | | |
| パワーシェル(xシェル) | | □ | |
| 10,000円[非課税] | | | |
| スーパーパワーシェル(cシェル)*1 | | | ●(必須) |
| 10,000円[非課税] | | | |

■:標準/□:オプション

*1:SPをお求めの場合、別途SPシェル(cシェル)代金10,000円(非課税)が必要となります。

●フィッティングソフトウェアは、いずれもPhonak Target 2.0以上です。

オーディオ S SMART I 性能一覧

| 管理医療機器認証番号:222AABZX00216000 | | M | P | SP |
|-----------------------------|--|-----------|-----|-----|
| 最大出力音圧レベル | 1,600Hz$\langle\text{dB}\pm 5\text{dB}\rangle$ | 111 | 127 | 132 |
| | ピーク値$\langle\text{dB}\text{以下}\rangle$ | 123 | 136 | 139 |
| 最大音響利得(50dB入力) | $\langle\text{dB}\pm 5\text{dB}\rangle$ | 45 | 56 | 68 |
| 全高調波ひずみ | 500Hz / 800Hz / 1,600Hz$\langle\% \text{以下}\rangle$ | 4 / 4 / 4 | | |
| 使用電池 | | PR41(312) | | |
| 電池寿命 | $\langle\text{時間}\rangle$ | 90~130 | | |

※本データはJIS C 5512:2000の密閉形疑似耳により、測定、表示してあります。※本カタログに掲載された電池寿命はJIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況や気温、湿度等の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。※本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

スイスのデジタル補聴器 フォナック www.phonak.jp

許可番号 13B2X10021

製造販売業: フォナック・ジャパン株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-4
レキシントン・プラザ西五反田
TEL:0120-06-4079
(お客様相談窓口 受付時間:月~金 9:00~17:30 土日祝休み)
FAX:0120-23-4080

フォナック製品のご相談・ご用命は…



※補聴器は、個々の難聴や「聞こえ」の程度に合わせて調整(フィッティング)することが必要です。

※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。

しかし、装用者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。

本カタログの内容は2012年2月現在のものです。

Audéo S SMART I

オーディオ エス スマートワン

うれしい聞こえを、うれしい価格で。



PHONAK
フォナック

life is on


小さいから、
つけていても
目立たない。

オーディオ S SMART I 片耳 128,000円

●補聴器は非課税です。



オーディオ S SMART I は、外部レシーバにより
高音質・小型化を実現した
CRT (カナル・レシーバ・テクノロジー) 補聴器。
小さく、軽く、装着感もより快適です。

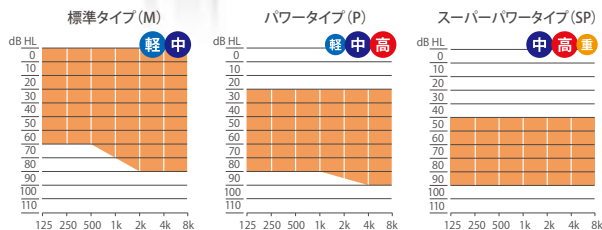

聞こえやすさを、お求めやすく。 これから補聴器を始めるあなたに、オーディオ S SMART I。

エス スマート ワン

聞きたい言葉が、聞き取りやすい。フォナックならではの高性能。

サウンドリカバー

「さ行」などの聞き取りづらい高い音を圧縮して、言葉を識別しやすくするフォナック自慢の機能。エントリークラスでは初めての搭載です。

*カナダの西オンタリオ大学との共同開発により実現

[サウンドリカバー オフ]



[サウンドリカバー オン]



[サウンドリカバー オフ]

さしすせそ


[サウンドリカバー オン]

さしすせそ

ウルトラズーム (指向性)

余計な騒音を抑えて、聞きたい言葉を聞き取りやすくする指向性マイクロホン機能です。外出時など周りが騒がしい場所で大変役立ちます。

[ウルトラズーム無し]

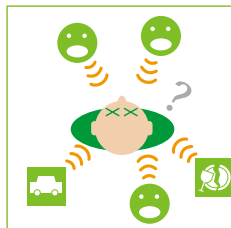

[ウルトラズーム有り]



全11色



●C0、F0、G3、G4、G5は2012年4月より販売予定です。