


特別な強さを、より多くの方へ。

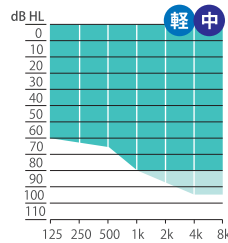

フォナック M H2Oは、  
軽度難聴・中等度難聴に  
対応しています。

■ スリムチューブ  
■ イヤック

補聴器では、業界初<sup>\*1</sup>の強さです。  
IP67を取得した防水・防塵補聴器<sup>\*2</sup>、  
フォナック M H2O 新登場。

# Phonak M H2O


Phonak Ambra / Solana / Cassia

フォナック M H2Oは、補聴器業界では初めて  
防水・防塵の国際保護等級IP67を取得。  
この等級は、粉塵試験装置に8時間入れた後や  
水面から1mの水中に30分間入れた後でも、  
修理が必要なダメージが発生しないことを  
示しています。水や汗、砂やホコリに  
より強い補聴器だから、いろいろなシーンで、  
より快適な聞こえをサポート。  
壊れにくく、ケアも簡単です。

国際保護等級

# IP67

防塵等級6級  
防水等級7級

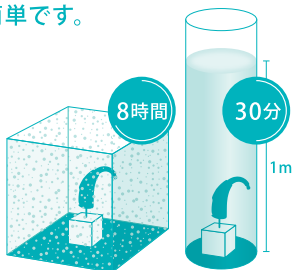

\*1: 2011年9月に取得。2012年1月現在(自社調べ)。\*2: 完全防水とは異なります。

「両耳装着機能」をはじめ、  
多くの技術を投入した  
ハイエンドクラス。

**フォナック  
アンブラ M H2O**

片耳 400,000円

管理医療機器認証番号  
222AABZX00213000

パフォーマンスと  
プライスのバランスに  
こだわったミドルクラス。

**フォナック  
ソラナ M H2O**

片耳 300,000円




管理医療機器認証番号  
223AABZX00052000

聞こえのテクノロジーを  
よりリーズナブルにお届け  
するベーシッククラス。

**フォナック  
カッシーア M H2O**

片耳 200,000円

管理医療機器認証番号  
223AABZX00054000

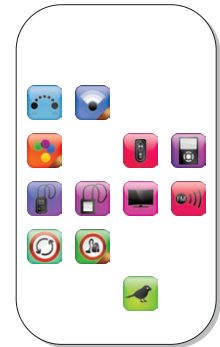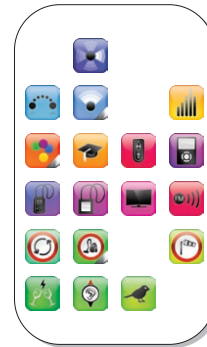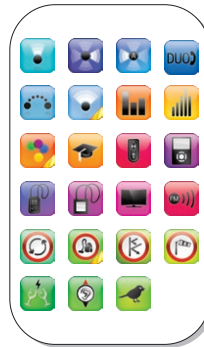

●補聴器は非課税です。●搭載機能の詳細はスパイスシリーズカタログまたは総合カタログをご覧ください。●掲載の機能にはオプションも含まれています。

## フォナック M H2O 性能一覧

- 最大出力音圧レベル 1,600Hz: 121dB±5dB / ピーク値: 133dB以下
- 最大音響利得 (50dB入力): 51dB±5dB
- 全高調波ひずみ 500Hz: 3%以下、800Hz: 3%以下、1,600Hz: 3%以下
- 誘導コイル感度: 84dB±6dB
- 使用電池: PR48 (13) ■電池寿命: 140~220時間

※本データはJIS C 5512:2000の密閉形擬似耳により、測定、表示してあります。※本カタログに掲載された電池寿命はJIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況や気温、湿度等の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。※両耳装着機能やアクセサリをご使用の場合、電池寿命が短くなります。※本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

製造販売業: フォナック・ジャパン株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-4 レキシントン・プラザ西五反田  
TEL: 0120-06-4079 (お客様相談窓口 受付時間: 月~金 9:00~17:30 土日祝休み)  
FAX: 0120-23-4080  
許可番号 13B2X10021

本カタログの内容は2012年2月現在のものです。

## IP67



補聴器業界初、防水・防塵の国際保護等級「IP67」を取得。



写真は原寸大です。


マイクロホンを保護する3層構造

耐水密閉型のプログラムスイッチ

2重構造のパッキン

水を防いで空気は通すメッシュ構造の防水カバー

シリコンによる補強で密閉度アップ

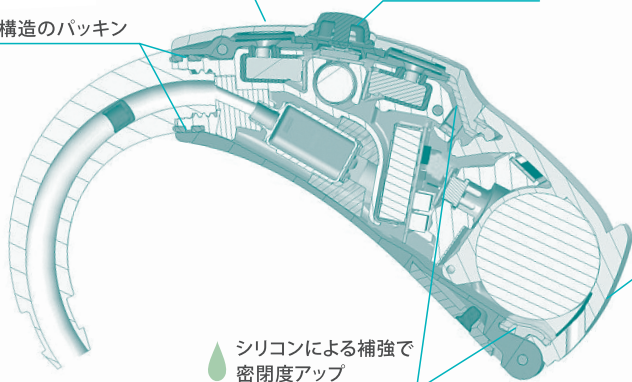

### 強さのヒミツ

毎日をもっと自由にアクティブに楽しみたい。  
そんな行動派のあなたのために、  
フォナックは、各部の隙間を徹底して抑え、  
水や湿気、ホコリなどの浸入を防ぐハウジングを追求しました。



フォナック M H2O用の一体型FM受信機ML15iもIP67を取得。キャンプや課外授業などのアウトドアでもお使いいただけます。

フォナック M H2Oは、全17色。あなたらしいカラーをお選びください。



※防水、防塵性能を維持するため、1年ごとのメーカーによるメンテナンスをおすすめします。(メンテナンス費用 5,000円。2年の保証期間内は無償)