



Life is on

「聞こえ」に悩むすべての人の声に耳を傾け、よりよい知識、アイデア、そして聴覚ケアをお届けする。フォナックは、人々がそれぞれの人生において、豊かな音を聞き取り、理解し、経験できるよう、これからも独創的な発想でテクノロジーの限界に挑みつけます。

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。豊かな人生のために、さあ Life is on!

スイスのデジタル補聴器 フォナック www.phonak.jp

製造販売業：フォナック・ジャパン株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-4 レキシントン・プラザ西五反田
TEL:0120-06-4079 (お客様相談窓口 受付時間：月～金 9:00～17:30 土日祝休み)
FAX:0120-23-4080
許可番号 [13B2X10021]

フォナック製品のご相談・ご用命は…



※補聴器は、個々の難聴や「聞こえ」の程度に合わせて調整(フィッティング)することが必要です。
※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。

本カタログの内容は2011年10月現在のものです。



さあ、つながる楽しさを プラスしよう。

ワクワクをプラス!

フォナック マイコム 26,040円(税込)

音楽や携帯電話の音を高音質で補聴器へ伝送します。



フォナック テレビ パッケージ 36,540円(税込)

好みの音量でテレビの音を補聴器に届けるテレビ用アクセサリ。

●フォナック マイコムとフォナック テレビリンクのセット商品です。



フォナック テレビリンク：単品価格 10,500円(税込)

FMシステム

学校や会社など騒がしい場所で、遠くにいる話し手の声をFM電波で届けます。

●こども向けからおとな向けまで多彩な機器をご用意しています。詳しくはFMシステムカタログをご覧ください。



ラクラクをプラス!

フォナック パイロットワン 18,900円(税込)

プログラム切り替え、ボリュームの調節を簡単に行えるシンプル・リモコン。



マイパイロット 47,250円(税込)

カラーディスプレイ付きの高機能リモコン。プログラム切り替え、ボリュームの調節、装用状態と電池残量の確認が可能です。



オリジナルカラーがいっぱい! ナイーダ Sなら、自分らしく楽しめる!



※ナイーダ S SP/UP 標準色：01(ベージュ)

ナイーダ S 機能一覧	〈ハイエンドクラス〉 ナイーダ S IX		〈ミドルクラス〉 ナイーダ S V		〈ベーシッククラス〉 ナイーダ S III		
	SP	UP	SP	UP	SP	UP	
チャンネル	20		16		6		
マニュアルプログラム	5		4		3		
両耳装着 指向性機能	ステレオズーム*1	■					
	オートズームコントロール*1	■					
	ズームコントロール*1	■	■				
	ダイレクトタッチ*1	■	■				
	デュオフォン*1	■					
	クイックシンク*1	■	■			■	
ウルトラズーム	■ プレミアム (33ch)		■ アドバンス (12ch)		■ スタンダード (1ch)		
学習機能	フレックスボリューム	■	■				
	フレックスコントロール	■					
	サウンドフロー	■ プレミアム		■ アドバンス		■ スタンダード	
	ユーザー志向のラーニング	■	■				
データログ	■					■	
その他の機能	ノイズブロック	■ プレミアム (20ch)		■ アドバンス (16ch)		■ スタンダード (6ch)	
	ホイッスルブロック	■	■			■	
	エコブロック	■					
	ウインドブロック	■	■				
	サウンドリカバー	■	■			■	
	サウンドリラックス	■	■				
	リアルイヤーサウンド	■	■				
	イージーフォン	■	■			■	
	イージーFM	■	■			■	
	プログラムスイッチ	■	■			■	
ボリュームコントロール	■	■			■		
Tコイル	■	■			■		
アウイセサリー	フォナック パイロットワン	□		□		□	
	マイパイロット	□		□		□	
	フォナック マイコム	□		□		□	
	フォナック テレビ パッケージ	□		□		□	
	フォナック クロス	□		□		□	
FMシステム	マイ・リンク・プラス	□		□		□	
	一体型受信機*2	□ML11i	□ML10i	□ML11i	□ML10i	□ML11i	□ML10i
	MLxi + オーディオチュー	□+AS11	□+AS10	□+AS11	□+AS10	□+AS11	□+AS10
	MLxi + フォナック マイコム	□		□		□	

*1 両耳装着時の機能です。*2 ナイーダ S 専用一体型受信機ML10i/ML11iも防水構造です。●フィッティングソフトウェアは、いずれもPhonak Target 1.2以上です。■：標準 / □：有償オプション

ナイーダ S 性能一覧

管理医療機器認証番号:223AA8Z00097000	ナイーダ S IX		ナイーダ S V		ナイーダ S III	
	SP	UP	SP	UP	SP	UP
最大出力音圧レベル	1,600Hz<dB±5dB>		132	135	132	135
	ピーク値<dB以下>		146	147	146	147
最大音響利得 (50dB入力)	<dB±5dB>		71	75	71	75
全高調波ひずみ	500Hz<%以下>		6		6	
	800Hz<%以下>		5		5	
	1,600Hz<%以下>		5		5	
誘導コイル感度	<dB±6dB>		101	105	101	105
使用電池	PR48 (13)	PR44 (675)	PR48 (13)	PR44 (675)	PR48 (13)	PR44 (675)
電池寿命	<時間>		130~200	300~470	130~200	300~470

※本データはJIS C 5512:2000の密閉形疑似耳により、測定、表示してあります。※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況や気温、湿度等の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。※本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。※両耳装着機能やアクセサリをご使用の場合、電池寿命が短くなります。

あのナイーダから、
"スバイス"チップ
搭載モデルが
新登場!

PHONAK
フォナック

life is on

もっと聞きたい。もっと楽しみたい。 生活に「アクティブ」という喜びを。


すべての高度・重度難聴の方が、毎日をもっとアクティブに楽しめること。私たちがめざしたのは、そんな補聴器です。パワフルで、しかも汗や水により強いナイーダに、フォナックが開発した“スパイス”チップを新たに搭載。心地よい聞こえやいっそうの使いやすさを追求しました。毎日つけるものだから、パワーも、防水性も、快適性も、操作性も。様々な要件に気を配り、トータルに性能を高めた新しい補聴器、それがナイーダ S^{SP}です。

新・パワー & 防水補聴器*、 ナイーダ S 登場。


高度・重度難聴の方をサポートする、
2つのパワー。



ナイーダ S SP
(スーパーパワータイプ)

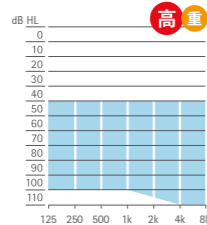

ナイーダ S UP
(ウルトラパワータイプ)

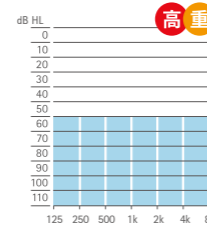

SPもUPも、
機能で選べる3つのグレード。

ハイエンドクラス
ナイーダ S IX SP/UP 片耳 420,000円

ミドルクラス
ナイーダ S V SP/UP 片耳 320,000円

ベーシッククラス
ナイーダ S III SP/UP 片耳 220,000円

●搭載機能は裏面の機能一覧をご覧ください。
●補聴器は非課税です。* JIS防水保護等級3級 (JIS C 0920)

おとなだって、 こどもだって、 汗や水を気にせず 自由に使いたい。

ナイーダ Sは、汗や水により強い*。
補聴器本体の各所に施した防水処理が、汗など水分の浸入を防止。アクティブなライフスタイルを大切にする方はもちろん、遊びざかりのお子さんにも、より快適にお使いいただけます。

水滴をはじく「ナノコーティング」。
ナイーダ Sは隙間部分を徹底的に小さくしたうえで、ボディ全体にナノコーティングを施しています。



* JIS防水保護等級3級 (JIS C 0920)

鉛直から60°範囲の散水によって
有害な影響のない性能を有しています。

※散水ノズルによる試験: 10ℓ / 分の水を器具の表面積1㎡あたり、最低5分間散水する試験。

●完全防水ではありませんので、プールや温泉での使用はお控えください。



防水

いっぱい聞いて、いっぱい話して、 もっとわかり合いたい。“スパイス”ならではの 聞こえの機能があなたをサポート。

ナイーダ Sに搭載した“スパイス”チップは、聞きたい音を聞くためにマイクロホンの指向性を高めるとともに、騒音やハウリング音をより正確に抑制するなど、デジタル機能をさらに進化させています。

聞きたい言葉が、聞き取りやすい。
だから、うれしい。

サウンドリカバー

鳥のさえずりやこどもの声など、聞き取りづらかった高い音をより聞き取りやすく。

ホイッスルブロック

ピーピーという不快なハウリング音を抑えて、聞こえをより快適に。

ウルトラズーム

余計な騒音を抑えて、言葉を聞き取りやすくする新しい指向性機能です。

より自然な音に、自動的に調節。
使いやすさが、ますますうれしい。

サウンドフロー

周りの音環境が変わったら、プログラムもスムーズに切り替え。

フレックスボリューム

画一的に音量を変えるのではなく、周波数ごとに音の大きさを自動的に調節。会話をより聞き取りやすくします。



パワー

スパイス